



SERINGUE AUTOMATIQUE SOCOREX® CLASSIC 167/187

FishGuide™ - Instructions de montage


Assemblage

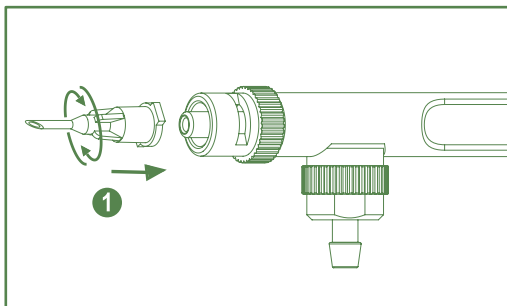

Fixer l'aiguille.

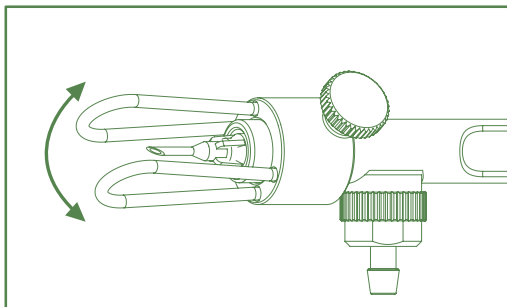

Régler l'écartement.

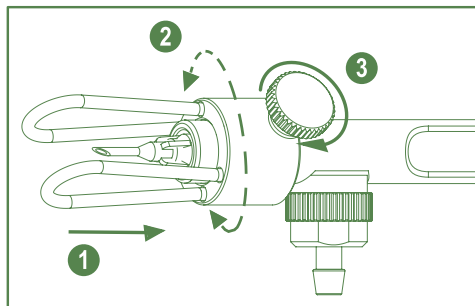

Insérer le FishGuide™ jusqu'à la butée ①, régler la position ②, serrer gentiment l'écrou ③.

Commande

Description	Emb.	N° cat.
FishGuide™ 15 mm	1/pack	1.187.015
FishGuide™ 25 mm	1/pack	1.187.025
FishGuide™ 45 mm	1/pack	1.187.045



Une mauvaise position du FishGuide™ ou un serrage excessif de l'écrou peuvent endommager l'embout et nuire à la bonne tenue de l'aiguille.



Toujours enlever le FishGuide™ avant de changer l'aiguille pour éviter de se blesser.

