

# controlador electrónico de pipetas

## Profiller™ *electro* 446


Controlador de pipetas que se adapta a cualquier mano de manera muy cómoda. La forma es ideal para trabajar con pipetas de vidrio o plástico en una cabina de flujo laminar o de seguridad microbiológica. Dispone de un potente motor, silencioso a la vez, con regulación de la velocidad de aspiración y dispensado ofreciendo una máxima eficiencia de trabajo incluso con grandes volúmenes de pipeteado. Un año de garantía.

### Ventajas del producto

- Una potente bomba - llena 25 ml en 3 segundos
- Utilización rápida, simple
- Pulsadores ergonómicos
- Indicador luminoso de nivel bajo de batería
- Batería de NiMH recargable durante el uso
- Filtro de membrana de protección intercambiable
- Soporte apto para sobremesa o para montaje mural



Pipetas hasta  
100ml

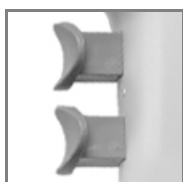

Pulsadores  
ergonómicos



Velocidad variable



Cargar directamente

### Soporte práctico

Apto para sobremesa o instalación en pared, sostiene el Profiller™ *electro* con o sin pipeta.



### Información para pedidos - Instrumento

Descripción	Enchufe de tipo	Emb.	Código
Profiller™ 446	Australia - N.Z.	1 / caja	446.100A
Profiller™ 446	Europa	1 / caja	446.100E
Profiller™ 446	Reino Unido	1 / caja	446.100G
Profiller™ 446	E.U.-Japón	1 / caja	446.100U

Suministrado con suministro eléctrico, dos filtros hidrófobos de repuesto (0.45 µm y 0.2 µm), un soporte de sobremesa/mural y un manual de instrucciones.

Por mas informaciones de este producto o de la gama Socorex en general, se encuentran en

[www.socorex.com](http://www.socorex.com)

### Información para pedidos - Accesorios

Descripción	Emb.	Código
Soporte de reemplazo	1 / caja	320.446
Batería NiMH de 1,2 V	1 / caja	900.916
Suministro eléctrico - Europa	1 / caja	900.946E
Suministro eléctrico - UK	1 / caja	900.946G
Suministro eléctrico - US / JP	1 / caja	900.946U
Filtro de membrana, 0.45 µm	5 / caja	322.435
Filtro de membrana, 0.2 µm	5 / caja	322.400
Soporte de pipeta de silicona	1 / caja	1.435.01
Cono de punta - blanco	3 / caja	1.435.02
Conos de punta - rosa, violeta, verde	3 / caja	1.435.03

XF-446.S-A709