

# micropipeta de deslocamento positivo

## Acura<sup>®</sup> positive 841

Pipetas de êmbolo com ponta em ETFE que proporcionam deslocamento positivo de amostras num tubo capilar de precisão. Ótima precisão e repetibilidade em pipetagem de líquidos de alta densidade, viscosos, escumantes ou voláteis.

Cinco modelos cobrem uma gama de 1 a 200 µl.

### Ventajas del producto

- Ajustamento passo a passo do volume
- Êmbolo e vidro capilar intermutáveis
- Código de cores correspondentes na pipeta, êmbolo e capilar
- Êmbolo de aço inoxidável com ponta em ETFE



### Informação de performance e encomenda - Instrumentos

| Volúmenes µl        | Inexactidão (%E) |              |             | Imprecisão (%CV) |            |           | Cat. Nº.       |
|---------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------|-----------|----------------|
|                     | Vol. Mín.        | Vol. Médio   | Vol. Máx.   | Vol. Mín.        | Vol. Médio | Vol. Máx. |                |
| 1-2-3-4-5           | < +/- 3.0 %*     | < +/- 2.3 %* | < +/- 2.0 % | < 2.5 %          | < 2.0 %    | < 1.2 %   | <b>841.005</b> |
| 5-10-15-20-25       | < +/- 1.5 %      | < +/- 1.2 %  | < +/- 0.8 % | < 1.0 %          | < 0.9 %    | < 0.6 %   | <b>841.025</b> |
| 10-20-30-40-50      | < +/- 1.2 %      | < +/- 1.0 %  | < +/- 0.7 % | < 0.8 %          | < 0.7 %    | < 0.4 %   | <b>841.050</b> |
| 60-75-80-90-100     | < +/- 0.7 %      | < +/- 0.7 %  | < +/- 0.7 % | < 0.6 %          | < 0.5 %    | < 0.3 %   | <b>841.100</b> |
| 100-120-150-175-200 | < +/- 0.7 %      | < +/- 0.7 %  | < +/- 0.7 % | < 0.3 %          | < 0.3 %    | < 0.3 %   | <b>841.200</b> |

\* Eliminar menisco no final do capilar, ou valor até 12% demasiado elevado.

Valores de performance obtidos com água bi-distilada a temperatura constante ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ) compreendida entre 20 e 25°C em conformidade com a norma ISO 8655.


### Información para pedidos - Accesorios

#### Vidros capilares de reserva

| Código de cores | Emb.       | Cat. Nº.       |
|-----------------|------------|----------------|
| Branco          | 200 / emb. | <b>341.005</b> |
| 2 x branco      | 200 / emb. | <b>341.025</b> |
| Verde           | 200 / emb. | <b>341.050</b> |
| Azul            | 200 / emb. | <b>341.100</b> |
| Vermelho        | 100 / emb. | <b>341.200</b> |

#### Êmbolos de reserva

| Código de cores | Emb.     | Cat. Nº.       |
|-----------------|----------|----------------|
| Aço             | 5 / emb. | <b>342.005</b> |
| Branco          | 5 / emb. | <b>342.025</b> |
| Verde           | 5 / emb. | <b>342.050</b> |
| Azul            | 5 / emb. | <b>342.100</b> |
| Vermelho        | 5 / emb. | <b>342.200</b> |

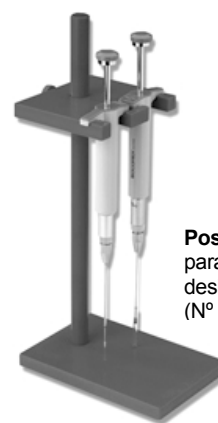

Posto de trabalho para duas pipetas de deslocamento positivo (Nº de Cat. 320.333)

Para mais informações sobre este produto da gama Socorex em geral, pode consultar o nosso site [www.socorex.com](http://www.socorex.com)