

Acura[®] capillar

gestire anche i liquidi più difficili

nuovo

micropipette a spostamento positivo



Micropipette a spostamento positivo ad alte prestazioni con tubo capillare in vetro e stantuffo rinforzato in ETFE intercambiabile. L'impugnatura sagomata e l'attivazione senza sforzo dello stantuffo offrono la massima ergonomia durante la dispensazione dei liquidi viscosi e schiumosi o solventi volatili.

Caratteristiche della linea Acura[®] capillar 846:

- Appoggio per dito compatto e confortevole
- Attivazione senza sforzo dello stantuffo
- Regolazione affidabile dei volumi preimpostati
- Codici di colore corrispondenti su pipetta, pistone e tubo capillare
- Stantuffo in acciaio inossidabile, con rinforzo in ETFE



Acura[®] capillar

846

SOCOREX
SWISS

Acura® capillar

gestire anche i liquidi più difficili



Massima praticità d'uso per il pipettaggio

La forma compatta dello strumento si adatta ad ogni mano. L'apposito appoggio consente di posizionare comodamente il dito sulla pipetta.

Attivazione dolce

Il sistema a molla ben progettato riduce lo sforzo necessario sullo stantuffo.



Regolazione del volume affidabile

Ogni pipetta dispone di cinque volumi preimpostati facili da regolare. Volumi chiaramente indicati sul cilindro della pipetta.



Codice di colore

Pipetta, puntale dello stantuffo e tubo capillare dello stesso colore per agevolare l'identificazione dei volumi.



Stantuffo rinforzato in ETFE

Il materiale ETFE, chimicamente inerte, offre un'eccellente resistenza a diretto contatto con i liquidi.

Garanzia

Modello 846 non sterilizzabile in autoclave. Lo strumento è coperto da garanzia di tre anni.



846

- 1 - 5 µl
- 5 - 25 µl
- 10 - 50 µl
- 60 - 100 µl
- 100 - 200 µl

Prestazioni e informazioni relative all'ordine - Strumento


Volumi	Inesattezza (E%)			Imprecisione (CV%)			N. cat.
	Vol. min.	Vol. medio	Vol. max.	Vol. min.	Vol. medio	Vol. max.	
1-2-3-4-5 µl	< +/- 3.0 %	< +/- 2.3 %	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	< 2.0 %	< 1.2 %	846.005
5-10-15-20-25 µl	< +/- 1.5 %	< +/- 1.2 %	< +/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.9 %	< 0.6 %	846.025
10-20-30-40-50 µl	< +/- 1.2 %	< +/- 1.0 %	< +/- 0.7 %	< 0.8 %	< 0.7 %	< 0.4 %	846.050
60-75-80-90-100 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %	846.100
100-120-150-175-200 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %	846.200

Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5°C) compresa tra 20 e 25°C in conformità con la direttiva EN ISO 8655

Informazioni relative all'ordine - Accessori

Codice di colore	Imballo	N. cat.	Codice di colore	Imballo	N. cat.
Tubi capillari in vetro di ricambio			Stantuffi di ricambio		
Bianco	200 / conf.	341.005	Acciaio	5 / conf.	342.005
2 x bianco	200 / conf.	341.025	Bianco	5 / conf.	342.025
Verde	200 / conf.	341.050	Verde	5 / conf.	342.050
Blu	200 / conf.	341.100	Blu	5 / conf.	342.100
Rosso	100 / conf.	341.200	Rosso	5 / conf.	342.200

Descrizione	Imballo	N. cat.
Supporto per pipette Socorex (tutti i modelli), grigio chiaro	1 / conf.	320.340

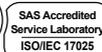

Vostro rivenditore



SOCOREX ISBA SA
 Champ-Colomb 7, casella postale
 1024 Ecublens/Lausanne
 Svizzera
 socorex@socorex.com
 www.socorex.com
 Tel. +41 (0)21 651 6000