

Stepper™
Präzision an Ihren Fingerspitzen

Repetierpipette für Ecostep™ Spritzen

Neu
bioproof
Spritzen



Höchst komfortable Pipette für ein verlässliches Seriendosieren in einem Volumenbereich von 10 bis 5000 µl. Die einmalige Vier-Fingerdruck-Funktion entlastet den Daumen. Sorgfältig ausgewählte Materialien bieten beste Schockresistenz. Kompakt einfache Form des Gehäuses verringert interne Kontamination. Grosse Auswahl an 53 verschiedenen Volumens; bis zu 73 Dosierungen pro Füllung.

Eigenschaften des Stepper™

- 4-Finger-Aktivierung
- Deutliche Anzeige von Volumen und Anzahl gewünschter Dosierungen
- Einfach und schnelle Arbeitsvorgänge
- Drei farbkodierte Ecostep™ Direktverdrängungs-Spritzen
- Stopp-Mechanismus am Ende des Dosierens
- Sterilisierte Ecostep™ Spritzen in *bioproof*-Version



Das Stepper™ Modell

411

Die Ecostep™ Spritzen

316

SOCOREX
SWISS

Stepper™

Präzision an Ihren Fingerspitzen



► Klare Anzeige der Einstellungen

Nach Einsatz der Einwegspritze, gewünschtes Volumen wählen. Präzise Markierung auf den Einstellknöpfen erlaubt ein deutliches Ablesen von Volumen und Anzahl der gewünschten Aliquoten.

► Vier-Fingerdruck-Funktion

Benutzerfreundliche Aktivierung vermeidet Ermüdung von Hand und Daumen bei Seriendosierungen.



► Ecostep bioproof™

Sterilisiert einzeln verpackte Spritzen mit hohem Reinheitsgrad. Jede Produktionsserie wird von unabhängigen Laboratorien geprüft und frei von DNase, RNase, humaner DNA und Pyrogenen zertifiziert.



► Dosierreihen


Auswahl an 53 Volumen

Anzahl Aliquoten	Volumen µl	Volumen µl	Volumen µl
73	10	50	500
49	15	75	750
36	20	100	1000
29	25	125	1250
24	30	150	1500
20	35	175	1750
18	40	200	2000
15	45	225	2250
14	50	250	2500
12	55	275	2750
11	60	300	3000
10	65	325	3250
9	70	350	3500
8	75	375	3750
8	80	400	4000
7	85	425	4250
7	90	450	4500
7	95	475	4750
6	100	500	5000

► Qualitätszertifikat und Garantie

Individuelles Qualitätszertifikat gemäss strikten Testverfahren. Siehe Packungsbeilage für Garantiebedingungen, Sicherheitsvorschriften und Betriebsanweisungen.

Zwei Jahre Garantie.

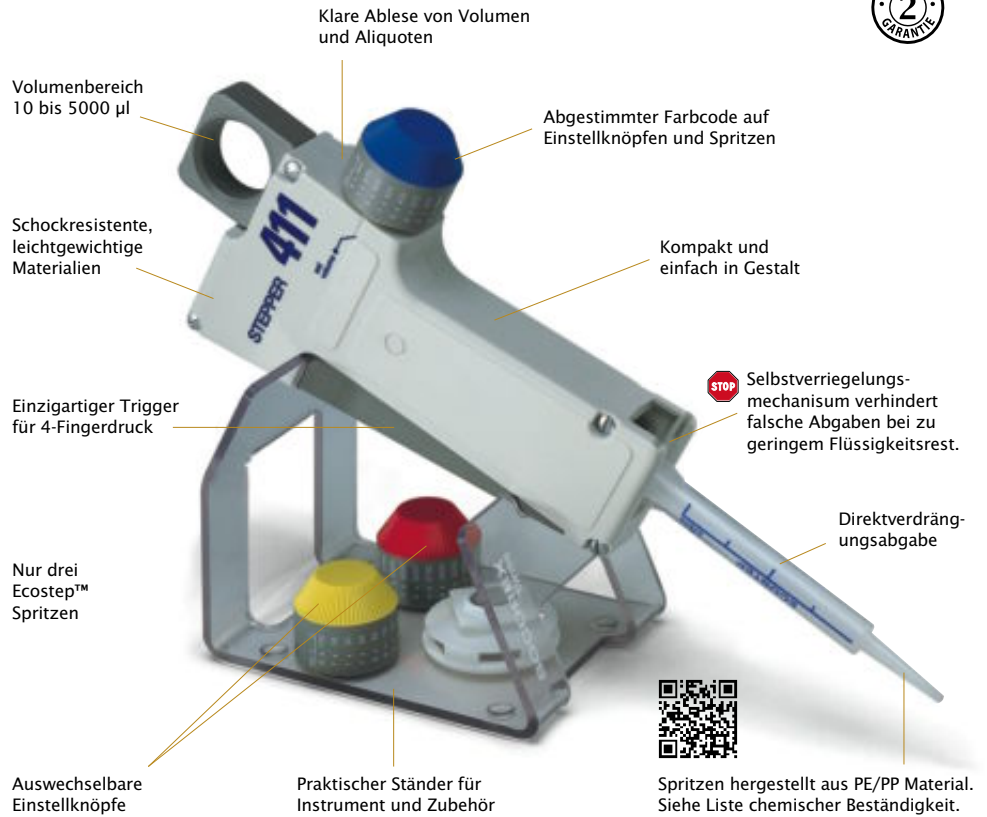

Leistungsdaten und Bestellinformation

Stepper™ 411

Beschreibung	Verpackung	Kat. Nr.
Stepper™ 411 (inkl. 3 auswechselbare Einstellknöpfe, 1 Adapter, Muster von Ecostep™ Spritzen)	1 / Vpk	411.5000
Adapter für rote Ecostep™ Spritzen	5 / Vpk	1.411.7
Ständer für einen Stepper™	1 / Vpk	320.411

Ecostep™ Spritzen

Nicht sterile Spritzen werden als Bulkware geliefert. Sterilisiert *bioproof* Spritzen mit hohem Reinheitsgrad sind einzeln verpackt und frei von DNase, RNase, humaner DNA und Pyrogenen (Endo Toxine) zertifiziert.

Volumenbereich	Kapazität Spritzen	Leistung bei	Unrichtigkeit (E%)	Unpräzision (CV%)	Version	Verpackung	Kat. Nr.
10 - 100 µl	0.75 ml	20 µl 100 µl	< ± 1.5 % < ± 1.0 %	< 1.5 % < 0.8 %	Nicht steril	Bulkware, 100/box	316.010
					Sterilisiert <i>bioproof</i>	Einzel verpackt 100x 1/Box	316.010.9
50 - 500 µl	3.75 ml	100 µl 500 µl	< ± 1.0 % < ± 0.5 %	< 1.0 % < 0.5 %	Nicht steril	Bulkware, 100/box	316.050
					Sterilisiert <i>bioproof</i>	Einzel verpackt 100x 1/Box	316.050.9
500 - 5000 µl	37.5 ml	1000 µl 5000 µl	< ± 0.8 % < ± 0.5 %	< 1.2 % < 0.4 %	Nicht steril	Bulkware, 100/box	316.500
					Sterilisiert <i>bioproof</i>	Einzel verpackt 100x 1/Box	316.500.9

Leistungswerte wurden mit destilliertem Wasser, bei einer konstanten (± 0.5°C) Raumtemperatur zwischen 20 und 25°C, gemäss beschriebener Methode in EN ISO 8655 erreicht.



Ihr Fachhandel



SOCOREX ISBA SA
 Champ-Colomb 7, Postfach
 1024 Ecublens/Lausanne
 Schweiz
socorex@socorex.com
www.socorex.com
 Tél. +41 (0)21 651 6000
 Fax +41 (0)21 651 6001