

Stepper™
La précision du bout des doigts

Pipette réglable à répétition pour seringues Ecostep™

nouvelles
bioproof
seringues



Confort d'utilisation, fiabilité et résultats performants caractérisent cette pipette à répétition. Activation du bout des doigts, sans contribution du pouce. Les matériaux soigneusement sélectionnés assurent une excellente résistance aux chocs. Le boîtier compact aux contours épurés élimine tout risque de contamination interne. Jusqu'à 73 doses disponibles parmi 53 volumes différents dans une plage de 10 à 5000 µl.

Caractéristiques du Stepper™

- Activation du bout des doigts
- Volume et nombre maximum de doses clairement marqués sur le bouton de réglage
- Emploi simple et rapide
- Trois seringues Ecostep™ à déplacement positif, avec code de couleur
- Arrêt de sécurité en fin de course
- Seringues Ecostep™ stérilisées en version *bioproof*



Le modèle Stepper™

411

Les seringues Ecostep™

316

 **SOCOREX**
SWISS

Stepper™

La précision du bout des doigts



► Réglage bien lisible

Après insertion de la seringue à usage unique, choisir le volume souhaité. Celui-ci, ainsi que le nombre correspondant d'aliquotes, se lisent facilement sur le bouton de réglage.

► Activation du bout des doigts

Fonctionnement ergonomique de la gâchette - limite la fatigue de la main et du pouce durant les dosages en série.



► Ecostep bioproof™

Seringues stérilisées certifiées exemptes d'ADN humain, DNase, RNase et pyrogènes. Emballées individuellement. Chaque lot testé en laboratoire spécialisés.




► Plage de travail

Choix de 53 volumes

Nombre d'aliquotes	Volume µl	Volume µl	Volume µl
73	10	50	500
49	15	75	750
36	20	100	1000
29	25	125	1250
24	30	150	1500
20	35	175	1750
18	40	200	2000
15	45	225	2250
14	50	250	2500
12	55	275	2750
11	60	300	3000
10	65	325	3250
9	70	350	3500
8	75	375	3750
8	80	400	4000
7	85	425	4250
7	90	450	4500
7	95	475	4750
6	100	500	5000

► Certificat de qualité et garantie

Rigoureux contrôle de qualité attesté par un certificat individuel. Voir le mode d'emploi pour les consignes de sécurité, d'utilisation et les conditions de garantie. Garantie deux ans.

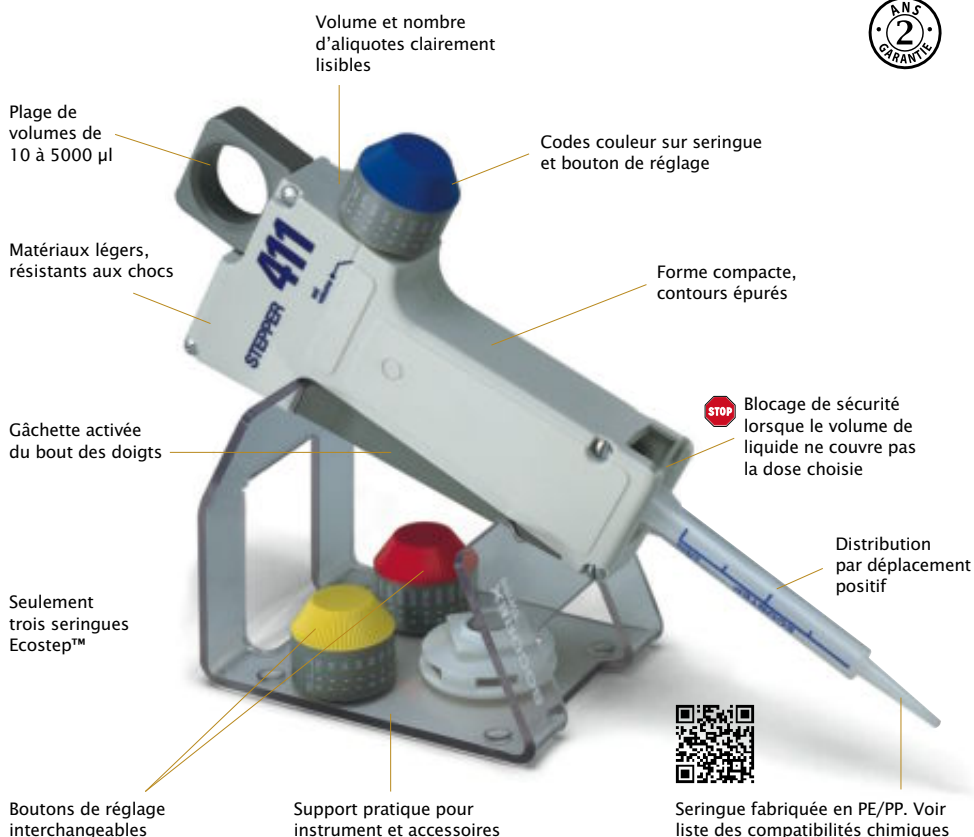

Performances et commande

Stepper™ 411

Description	Emballage	No. cat.
Stepper™ 411 avec 3 boutons de réglage interchangeables, adaptateur, échantillons de seringues Ecostep™	1 / pk	411.5000
Adaptateur de rechange pour seringue Ecostep™ rouge	5 / pk	1.411.7
Support pour un Stepper™	1 / pk	320.411

Seringues Ecostep™

Seringues non stériles livrées en vrac. Version *bioproof* stérilisée, en emballage individuel, avec très haut degré de pureté. Chaque lot est testé individuellement par des laboratoires indépendants quant à la stérilité, et certifié exempt d'ADN humain, de DNase, RNase et de pyrogènes (endotoxines).

Plage de volumes	Capacité seringue	Performance à	Justesse (E%)	Précision (CV%)	Version	Emballage	No. cat.
10 - 100 µl	0.75 ml	20 µl	< ± 1.5 %	< 1.5 %	Non stérile	Vrac, 100/box	316.010
		100 µl	< ± 1.0 %	< 0.8 %	Stérilisée <i>bioproof</i>	Individuel 100x 1/boite	316.010.9
50 - 500 µl	3.75 ml	100 µl	< ± 1.0 %	< 1.0 %	Non stérile	Vrac, 100/box	316.050
		500 µl	< ± 0.5 %	< 0.5 %	Stérilisée <i>bioproof</i>	Individuel 100x 1/boite	316.050.9
500 - 5000 µl	37.5 ml	1000 µl	< ± 0.8 %	< 1.2 %	Non stérile	Vrac, 100/box	316.500
		5000 µl	< ± 0.5 %	< 0.4 %	Stérilisée <i>bioproof</i>	Individuel 100x 1/boite	316.500.9

Performances obtenues avec de l'eau bi-distillée à température constante (± 0,5°C) entre 20 et 25°C, en accord avec la méthode décrite dans la norme ISO 8655.



Votre distributeur



SOCOREX ISBA SA
 Champ-Colomb 7, case postale
 1024 Ecublens/Lausanne
 Suisse
socorex@socorex.com
www.socorex.com
 Tél. +41 (0)21 651 6000
 Fax +41 (0)21 651 6001