

Stepper™

Dosaggio di precisione a quattro dita

Pipetta a ripetizione regolabile per siringhe Ecostep™

nuovo
bioproof
siringhe



Pipetta estremamente maneggevole progettata per erogazioni a ripetizione altamente affidabili con volumi compresi tra 10 e 5000 µl. Meccanismo di dosaggio con un unico tasto in grado di ridurre l'affaticamento del pollice. I materiali selezionati offrono un'ottima resistenza agli urti. Il design compatto riduce sensibilmente la contaminazione all'interno dello strumento. Ampia selezione tra 53 diversi volumi; fino a 73 dosaggi per ogni carica.

Caratteristiche dello Stepper™

- Attivazione a quattro dita
- Manopole di regolazione con chiara indicazione dei volumi e del numero di dosaggi
- Operazioni semplici e rapide
- Tre siringhe Ecostep™ a spostamento positivo, con codice di colore
- Meccanismo autobloccante
- Siringhe sterili Ecostep™ del tipo *bioproof*



Modello Stepper™

411

Siringhe Ecostep™

316

SOCOREX
SWISS

Stepper™

Dosaggio di precisione a quattro dita



► Indicazione chiara delle regolazioni

Dopo avere inserito la siringa monouso, selezionare il volume appropriato. I contrassegni sulle manopole di regolazione consentono di leggere direttamente il volume impostato e il corrispondente numero di dosaggi.

► Attivazione mediante la punta delle dita

Il sistema ergonomico di dosaggio a quattro dita al posto del pollice riduce l'affaticamento della mano durante i dosaggi multipli.



► Ecostep bioproof™

Siringhe sterili ad elevata purezza in confezioni singole. Ogni lotto è certificato da laboratori indipendenti per garantire la sterilità e l'assenza di desossiribonucleasi, ribonucleasi, DNA umano e pirogeni.




► Gamma di dosaggio

Selezione di 53 diversi volumi

N. di parti	Volume µl	Volume µl	Volume µl
73	10	50	500
49	15	75	750
36	20	100	1000
29	25	125	1250
24	30	150	1500
20	35	175	1750
18	40	200	2000
15	45	225	2250
14	50	250	2500
12	55	275	2750
11	60	300	3000
10	65	325	3250
9	70	350	3500
8	75	375	3750
8	80	400	4000
7	85	425	4250
7	90	450	4500
7	95	475	4750
6	100	500	5000

► Controllo della qualità e garanzia

Certificazione individuale di controllo della qualità rilasciata dopo rigorosi tests. Per ulteriori informazioni su termini completi di garanzia, precauzioni per la sicurezza e istruzioni per l'uso, leggere il foglietto illustrativo all'interno della confezione. Garanzia di due anni.

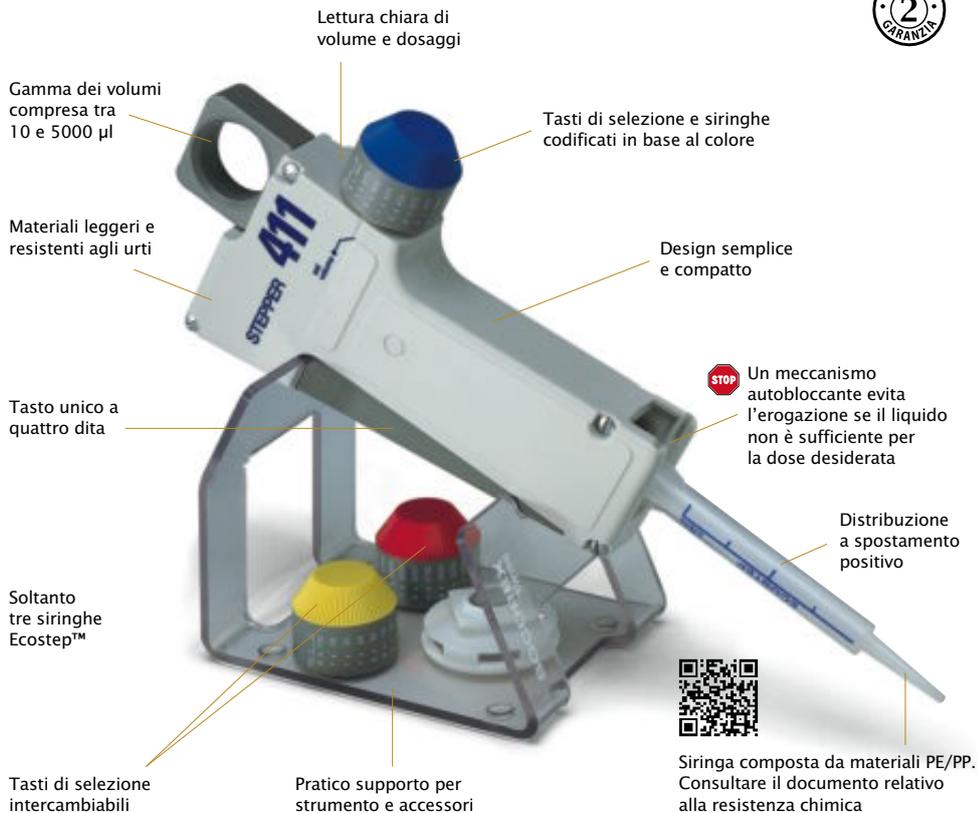

Prestazioni e informazioni relative all'ordine

Stepper™ 411

Descrizione	Confezione	N. cat.
Stepper™ 411 (inclusi tre manopole di selezione, adattatore, campioni di siringa Ecostep™)	1 / conf.	411.5000
Adattatore di sostituzione per siringa Ecostep™ rossa	5 / conf.	1.411.7
Supporto per uno Stepper™	1 / conf.	320.411

Siringhe Ecostep™

Le siringhe non sterili sono fornite sfuse. Versione sterile in confezione singola. Ogni lotto delle siringhe *bioproof* con elevata purezza biologica è certificato da laboratori indipendenti per garantire l'assenza di DNA umano, desossiribonucleasi, ribonucleasi e pirogeni (endotossine).

Volume	Capacità siringa	Prestazioni a	Percentuale di errore (E%)	Imprecisione (CV%)	Versione	Confezione	N. cat.
10 - 100 µl	0.75 ml	20 µl	< ± 1.5 %	< 1.5 %	Non sterile	Sfuse,100/scatola	316.010
		100 µl	< ± 1.0 %	< 0.8 %	<i>bioproof</i> sterile	Conf. singola 100x 1/ scatola	316.010.9
50 - 500 µl	3.75 ml	100 µl	< ± 1.0 %	< 1.0 %	Non sterile	Sfuse,100/scatola	316.050
		500 µl	< ± 0.5 %	< 0.5 %	<i>bioproof</i> sterile	Conf. singola 100x 1/ scatola	316.050.9
500 - 5000 µl	37.5 ml	1000 µl	< ± 0.8 %	< 1.2 %	Non sterile	Sfuse,100/scatola	316.500
		5000 µl	< ± 0.5 %	< 0.4 %	<i>bioproof</i> sterile	Conf. singola 100x 1/ scatola	316.500.9

Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5° C) compresa tra 20 e 25 °C, in conformità con la direttiva EN ISO 8655.



Vostro rivenditore



SOCOREX ISBA SA
 Champ-Colomb 7, CP
 1024 Ecublens/Lausanne
 Svizzera
socorex@socorex.com
www.socorex.com
 Tél. +41 (0)21 651 6000
 Fax +41 (0)21 651 6001