

Passend für alle kleinen und mittelgrossen Labor-, Medizin-, Dental- oder Veterinär-Instrumente. Die Qualitix® Einwegbeutel dienen zur einfachen und effektiven Verpackung von Sterilisationsgut. Hergestellt aus robustem Papier der medizinischen Güteklasse, lassen sich die Beutel einfach durch das selbstklebende Band dicht verschliessen und erhalten so die Sterilität. Der Inhalt ist immer sichtbar durch die transparente PET / CPP Folie.



Fragen Sie nach Gratismustern

Die Qualitix® Sterilisationsbeutel


Produktvorteile

- Robustes, beständiges Material
- Schnelle Erkennung des Inhaltes
- Breiter, selbstklebender Steifen, einfach zu verschliessen
- Knickfalte zum einfachen Öffnen
- Geeignet für Dampf- und EO Gassterilisation
- Zwei Sterilisationsindikatoren
- Fünf verschiedene Grössen
- ISO 17665-06, ISO 11135 konform, CE



Selbstschliessend - einfach zu öffnen ①

Einfach den Schutzstreifen entfernen, falten und mit den Fingern pressen. Der Beutel bleibt dicht verschlossen und erhält die Sterilität.

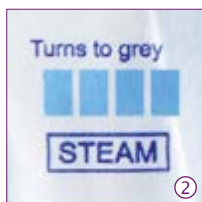


Sterilisationsindikatoren ②

Es sind zwei chemische Indikatoren vorhanden, um den erfolgreichen Sterilisationsvorgang zu bestätigen. Der blaue Indikator wird dunkelgrau nach dem Autoklavieren. Der rote Indikator wird gelb nach einer Ethylenoxid (EO) Sterilisation.



Kontrolle der Intaktheit ③

Die blaugesprenkelte Folie ermöglicht es, die Intaktheit einfach zu kontrollieren. Benutzen Sie niemals einen beschädigten Beutel.

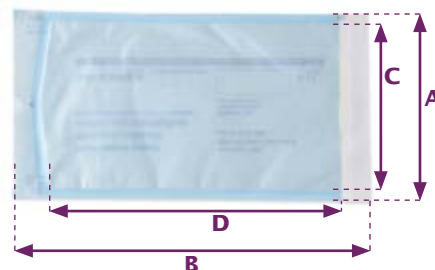

Bestellinformationen

| Beschreibung | Dimension | | Material | Verpackung | Kat. Nr. |
|------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------|-----------|
| Beutel, selbstdichtend | 83 x 160 mm | 3.3" x 6.3" | Med. Güteklasse Papier/PET/ CPP | 200 / Vpk | 3210.0816 |
| Beutel, selbstdichtend | 90 x 260 mm | 3.5" x 10.2" | Med. Güteklasse Papier/PET/ CPP | 200 / Vpk | 3210.0926 |
| Beutel, selbstdichtend | 135 x 260 mm | 5.3" x 10.2" | Med. Güteklasse Papier/PET/ CPP | 200 / Vpk | 3210.1326 |
| Beutel, selbstdichtend | 190 x 360 mm | 7.5" x 14.2" | Med. Güteklasse Papier/PET/ CPP | 200 / Vpk | 3210.1936 |
| Beutel, selbstdichtend | 300 x 395 mm | 11.8" x 15.6" | Med. Güteklasse Papier/PET/ CPP | 200 / Vpk | 3210.3040 |

Dimensionen

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|--------|--------|--------|--------|
| 83 | 160 | 65 | 110 |
| 90 | 260 | 70 | 205 |
| 135 | 260 | 115 | 205 |
| 190 | 360 | 170 | 300 |
| 300 | 395 | 270 | 335 |