


Socorex® *ultra* 1810

Iniezioni da micro a medie | Prestazione superiore | Qualità duratura

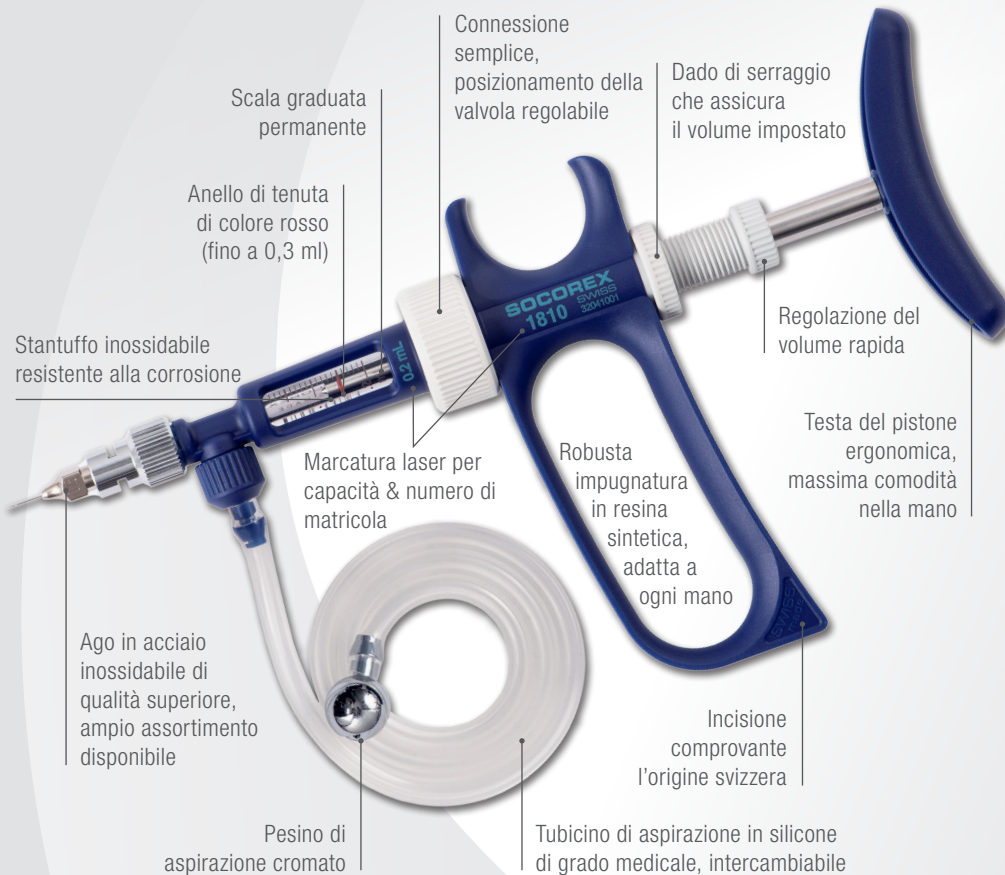

Iniezioni più leggere e più dolci

Le siringhe per iniezioni animali Socorex® *ultra* 1810 danno inizio a una nuova era con dosi altamente precise all'interno del range da 0,02 a 2 ml.

Riutilizzabile, estremamente robusta, sebbene leggera, la linea offre un'ergonomia insuperata e un'attivazione dolce, limitando l'affaticamento della mano in modo significativo.

Caratteristiche e vantaggi

- Qualità superiore, destinata a durare
- Peso leggero e attivazione dolce
- Prestazioni metrologiche elevate
- Adatte per tutti i tipi di vaccini e terapie
- Smontaggio e manutenzione semplici
- Autoclavabili anche completamente assemblate

Selezione superiore dei materiali

I materiali selezionati con cura garantiscono una resistenza elevata e lunga durata.



Ulteriori dettagli

Scegliete il modello più adatto

Trovate la combinazione volume/corsa ideale per garantire il miglior comfort della mano e un livello di prestazioni ottimale.

Capacità della siringa ml	Corsa della siringa e prestazioni (CV%)								
	Vol. minimo			Vol. medio			Vol. massimo		
	Volume ml	Corsa mm	CV%	Volume ml	Corsa mm	CV%	Volume ml	Corsa mm	CV%
0.1	0.02	4.0	<1.8%	0.05	9.5	<1.2%	0.1	19.5	<0.5%
0.2	0.05	6.0	<1.6%	0.1	11.5	<1.0%	0.2	23.0	<0.5%
0.3	0.05	3.5	<1.4%	0.15	10.5	<0.9%	0.3	21	<0.45%
0.5	0.1	4.5	<1.2%	0.25	11.5	<0.8%	0.5	22.5	<0.4%
1.0	0.1	2.0	<0.7%	0.5	9.5	<0.6%	1.0	19	<0.4%
2.0	0.3	3.0	<0.6%	1.0	10.5	<0.5%	2.0	21	<0.4%


I dati relativi alle prestazioni possono variare sulla base del tipo di liquido, viscosità e dimensione dell'ago.

Informazioni per l'ordine - Strumenti e parti essenziali

Siringhe pronte all'uso. La fornitura standard comprende 1 metro di tubicino di alimentazione, pesino, ago di alimentazione, cannula di sfiato, sacchetto con ricambi contenente cartucce delle valvole, O-ring del fusto, O-ring del pistone e guida (solo fino a 0,3 ml) e istruzioni d'uso.

Siringhe ultra 1810				Parti essenziali, codice			
Capacità ml	Range di volume ml	Divisione ml	Codice	Fusti in vetro 6 / conf.	Set di ricambi	Tubicino di alimentazione, 1m	O-ring 10 / conf.
0.1	0.02 - 0.1	0.005	1810.2.05001	01810.001	1.1810.72001	1810.705	1810.951
0.2	0.05 - 0.2	0.01	1810.2.05002	01810.002	1.1810.72002	1810.705	1810.952
0.3	0.05 - 0.3	0.025	1810.2.05003	01810.003	1.1810.72003	1810.705	1810.953
0.5	0.1 - 0.5	0.05	1810.2.05005	01810.005	1.1810.72005	187.705	-
1.0	0.1 - 1	0.05	1810.2.0501	01810.01	1.1810.7201	187.705	-
2.0	0.3 - 2	0.1	1810.2.0502	01810.02	1.1810.7202	187.705	-

Esempi di ambiti di applicazione

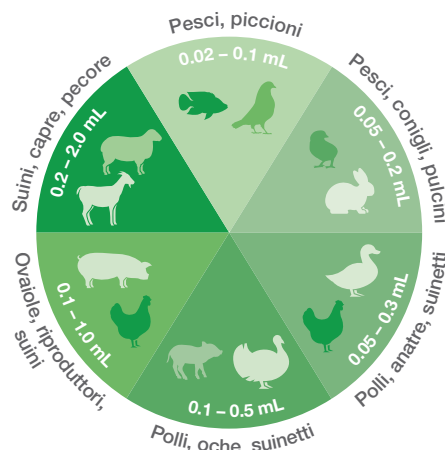

Smontaggio e manutenzione

Le siringhe sono costituite da poche parti, facili da smontare / riassemble. L'accesso rapido consente manutenzione e pulizia efficienti.

Sterilizzazione completamente assemblate in acqua bollente o in autoclave a 121°C / 250°F.



Informazioni per l'ordine - Accessori

Abacus™ contatore di colpi


Effettua conteggi precisi di tutte le iniezioni. Facile da installare e rimuovere, non richiede l'uso di alcun utensile.



Descrizione	Codice
Contatore, 0.1 / 0.2 ml, 1 / conf.	1.1810.962
Contatore, 0.3 - 2 ml, 1 / conf.	1.1810.966
Magnete per reimpostare, 1 / conf.	1.1810.446

FishGuide™


Posizionamento ideale dell'ago (siringhe fino a 0.5 ml) durante l'iniezione dei pesci. Riduce il rischio di lesioni.

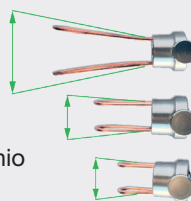

Misura della guida	Confezione	Codice
15 mm lunghezza	1 / conf.	1.1810.015
25 mm lunghezza	1 / conf.	1.1810.025
45 mm lunghezza	1 / conf.	1.1810.045

Aghi da iniezione

Aghi di qualità superiore, Luer Lock, acciaio inossidabile. Durata eccezionale, autoclavabili.

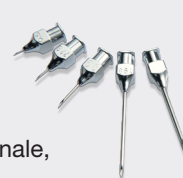

Scansionare per informazioni sugli aghi