

Nuevo

Modelos dobles

La jeringa ligera doble ultra 2810

La jeringa doble ultra 2810 es un 40 % más ligera, requiere un 30 % menos de fuerza y tiene un mango un 20 % más corto*. Ofrece comodidad y facilidad de uso, independientemente del tamaño de la mano, al inyectar animales de tamaño pequeño o mediano.

- Permite la administración simultánea de dos líquidos distintos
- Ofrece una precisión sin igual en la inyección de microvolúmenes
- Volumen ajustable de forma independiente
- Cuerpo robusto y ligero, fabricado en resina reforzada con fibra de vidrio

*en comparación con el equivalente classic.



2810

- 0.1 - 0.5 ml
- 0.1 - 1 ml
- 0.3 - 2 ml




No. Cat. 1.287,685

Limita las punciones en la piel

Compatible con el colector de acero inoxidable, que permite inyectar dos líquidos distintos mediante una sola aguja. Resulta útil para limitar las punciones en la piel y las posibles lesiones en los animales. Se monta fácilmente, sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas adicionales.

Desmontaje y mantenimiento

La jeringa es fácil de desmontar y volver a montar. El acceso rápido a todos los componentes permite una limpieza rápida y eficiente. Durabilidad comprobada; todas las piezas de repuesto están disponibles.

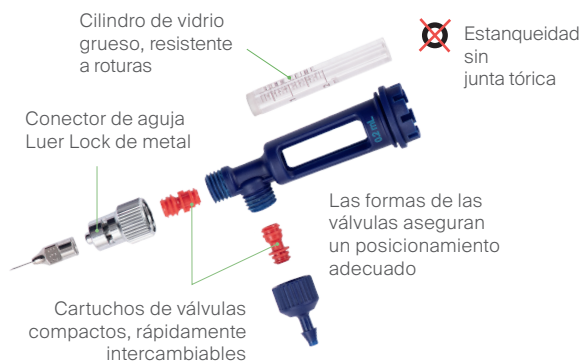

Los modelos de jeringa ultra 2810

**Con soporte de vial
2810.1**

**Con tubo de alimentación
2810.2**

Prestaciones e información de pedido

El suministro estándar incluye una jeringa con boquillas Luer Lock, dos arandelas de cilindro, guía rápida y, según el modelo, juego de soporte para viales o juego de tubos de alimentación.



Rango del volume (ml)	División (ml)	Precisión (CV%)			No. Cat.	
		Vol. mín.	Vol. med.	Vol. máx.	Modelo con soporte de vial	Modelo con tubo de alimentación
0.1 - 0.5	0.05	< 1.2%	< 0.8%	< 0.4%	2810.1.05005	2810.2.05005
0.1 - 1	0.05	< 0.7%	< 0.6%	< 0.4%	2810.1.0501	2810.2.0501
0.3 - 2	0.1	< 0.6%	< 0.5%	< 0.4%	2810.1.0502	2810.2.0502