

Acura® capillar

superando até os líquidos difíceis

novο

micropipeta de deslocamento positivo



Micropipeta de deslocamento positivo de alto desempenho incluindo um tubo de vidro capilar cambiável e êmbolo com ponteira ETFE. O cabo em formato flexível e a ativação suave de êmbolo proporcionam um melhor conforto manual ao manusear líquidos viscosos, soluções espumantes ou solventes voláteis.

A Acura® capillar 846 contém:

- Apoio confortável e fino para o dedo
- Ativação suave de êmbolo
- Ajuste de volume confiável e passo a passo
- Códigos de cores correspondentes nas pipetas, êmbolos e capilares
- Êmbolo de aço inoxidável com ponteira ETFE




A Acura® capillar

846

 **SOCOREX**
SWISS

Acura® capillar

superando até os líquidos difíceis

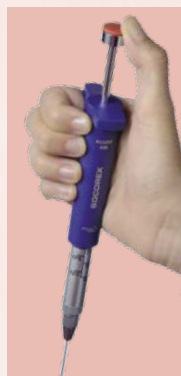

Maior conforto de pipetagem

A forma anatômica do instrumento ajusta-se a qualquer mão. Um gancho confortável permite que a pipeta se encaixe naturalmente no dedo.

▶ Ativação suave

Sistema de mola bem projetado que reduz a força aplicada no êmbolo



▶ Ajuste de volume confiável

Cada pipeta tem cinco volumes predefinidos e de fácil ajuste. Leitura clara de volume no corpo da pipeta.



▶ Codificação de cores

Pipeta, ponteira do êmbolo e vidro capilar compatíveis com a codificação de cor para facilitar a identificação de volume.



▶ Êmbolo com ponteira ETFE

Material ETFE quimicamente inerte que oferece excelente resistência quando está em contato direto com líquidos.

▶ Garantia

O modelo 846 não é autoclavável. O instrumento é coberto com uma garantia de fábrica de três anos.



846

1 - 5 µl
5 - 25 µl
10 - 50 µl
60 - 100 µl
100 - 200 µl

Posto de trabalho 340

Para arrumar de maneira prática 1 - 3 pipetas.

Informações de desempenho e encomenda - Instrumento

Volumes	Inexatidão (E%)			Imprecisão (CV%)			Cat. Nº
	Vol. mín.	Vol. médio	Vol. máx.	Vol. mín.	Vol. médio	Vol. máx.	
1-2-3-4-5 µl	< +/- 3.0 %	< +/- 2.3 %	< +/- 2.0 %	< 2.5 %	< 2.0 %	< 1.2 %	846.005
5-10-15-20-25 µl	< +/- 1.5 %	< +/- 1.2 %	< +/- 0.8 %	< 1.0 %	< 0.9 %	< 0.6 %	846.025
10-20-30-40-50 µl	< +/- 1.2 %	< +/- 1.0 %	< +/- 0.7 %	< 0.8 %	< 0.7 %	< 0.4 %	846.050
60-75-80-90-100 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.3 %	846.100
100-120-150-175-200 µl	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< +/- 0.7 %	< 0.3 %	< 0.3 %	< 0.3 %	846.200

Valores de desempenho obtidos com água bidestilada a temperatura constante ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) compreendida entre 20 e 25°C em conformidade com a norma ISO 8655

Informação para encomenda - Acessórios

Código de cores	Embalagem	Cat. Nº	Código de cores	Embalagem	Cat. Nº
Vidros capilares de reserva			Êmbolos de reserva		
Branco	200 / emb.	341.005	Aço	5 / emb.	342.005
2 x branco	200 / emb.	341.025	Branco	5 / emb.	342.025
Verde	200 / emb.	341.050	Verde	5 / emb.	342.050
Azul	200 / emb.	341.100	Azul	5 / emb.	342.100
Vermelho	100 / emb.	341.200	Vermelho	5 / emb.	342.200
Descrição			Embalagem		
Suporte para 3 pipetas Socorex (todas modelos), cinza claro	1 / emb.	320.340			



SAS Accredited
Service Laboratory
ISO/IEC 17025

G.M. SYSTEM
ISO 9001/13485
CERTIFIED

Seu distribuidor local



SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, P.O. Box
1024 Ecublens/Lausanne
Suíça
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Fone +41 (0)21 651 6000