

Esta nova geração de controlador de pipeta se adapta a qualquer mão de modo confortável. O formato é ideal para trabalhar com pipetas de vidro ou plástico em fluxo laminar ou cabine de segurança microbiológica. A eficiência máxima de trabalho, mesmo com grandes volumes de pipetagem, é atingida por meio de uma bomba de motor potente, mas silencioso, e da disponibilidade de diversas opções de ajuste. Garantia de um ano.


Profiller™ *electro* 447

Vantagens do produto

- Bomba potente - enche 25 ml em 3 segundos
- Operação simples e rápida
- Gatilhos confortáveis para o dedo
- Display amplo sempre visível
- Indicador de carga de bateria em tempo real
- Bateria NiMH recarregável durante o uso
- Construção confiável para resistência a choques e a produtos químicos
- Filtro de membrana de proteção trocável
- Suportes compactos de parede e bancada

447

pipetas
até 100 ml
e acima

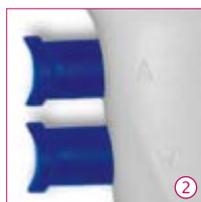

Escolha dos modos de dosagem ①

Ativação rápida de dosagem com jato (TC) ou modo de gravidade (TD).

Ajuste rápido de velocidade ①

Um botão permite a seleção de aspiração rápida ou lenta e das necessidades de dosagem, claramente indicadas no mostrador.

Informações para encomenda - Instrumento

Fornecido com cabo e fonte de energia, dois filtros hidrofóbicos sobressalentes (0.45 µm e 0.2 µm), suporte de bancada, suporte de parede e manual de instruções.

Profiller™ <i>electro</i> 447	Embalagem	Cat. No.
Com ficha tipo Europeu	1 / emb.	447.100E
Com ficha tipo RU	1 / emb.	447.100G
Com ficha tipo EUA-Japão	1 / emb.	447.100U

Gatilhos de dedo ②

Aspiração e dosagem controladas por meio de dois gatilhos de dedo posicionados de modo ergonômico, exigindo esforço mínimo de ativação. O gatilho permite a regulagem gradual de velocidade.

Carregamento de bateria ③

O plugue do instrumento permite carregar a bateria na posição de armazenamento ou durante o uso. Nível de carga visível no mostrador.

Suportes convenientes

Instrumento fornecido com suporte de bancada estável ④ incluindo três sugadores e suporte de parede adesivo ⑤.

Informações para encomenda - Acessórios e peças de reposição

Descrição	Embalagem	Cat. No.
Suporte de reserva	1 / emb.	320.947
Cabide de parede de reserva	1 / emb.	320.447
Bateria de 1.2V NiMH de reserva	3 / emb.	900.917
Alimentação elétrica, ficha tipo Europeu	1 / emb.	900.947E
Alimentação elétrica, ficha tipo RU	1 / emb.	900.947G
Alimentação elétrica, ficha tipo EUA-Japão	1 / emb.	900.947U

Descrição	Embalagem	Cat. No.
Filtro de membrana. 0.45µm	5 / emb.	322.447
Filtro de membrana. 0.2µm	5 / emb.	322.407
Porta pipetas de silicone	1 / emb.	1.447.01
Bocal cônico	1 / emb.	1.447.02